



Manual - Installation och administration LifeCare Mobil Omsorg/Phoniro PI


Uppdaterad 2024-05-03

I det här dokumentet är avsnittet "installation" endast riktat till privata utförare.
(Solna Stads egen regi kan bortse från avsnittet med anledning av MDM-verktyg).


- **Installation Lifecare Mobil Omsorg (privata utförare):**

För nedladdning av applikation Lifecare Mobil Omsorg, används länk.
- Se dok Systemversioner.


- LMO laddas ned genom att klistra in länk i webbläsare. Appen hamnar i "Mina filer" - "Nedladdningar"

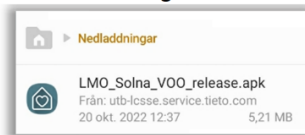


- För installation: öppna filen - välj "Installera"

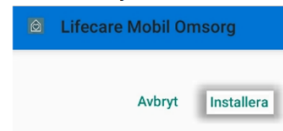


- Installationen påbörjas..

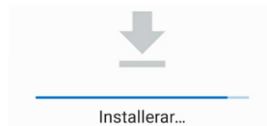

- När installationen är färdig efterfrågar appen behörigheter. Välj "Tillåt"

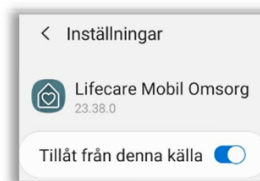

- Nu är appen installerad

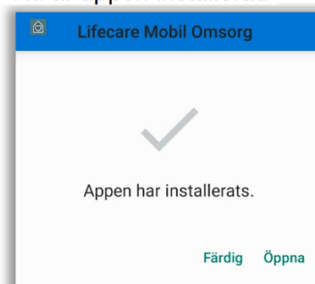




- **Installation Phoniro PI (privata utförare):**

- Appen Phoniro PI hämtas via Google Play Butik




Google Play



- Sök på: Phoniro PI
Välj "Installera"

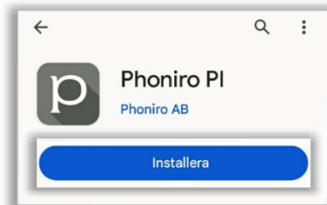

- Appen installeras..

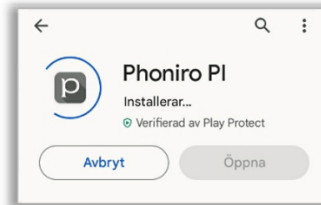


- När appen installerats:
Välj "Öppna"

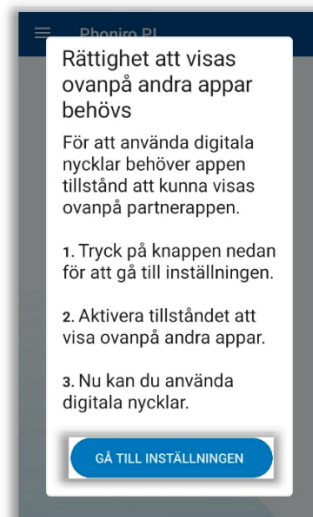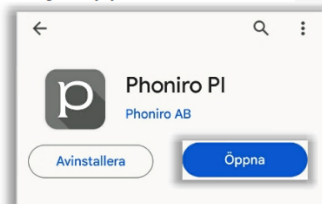

- När installationen är färdig efterfrågar applikationen behörigheter. Öppna alternativet "Gå till inställningen".

- Därifrån - välj "Tillåt behörighet"

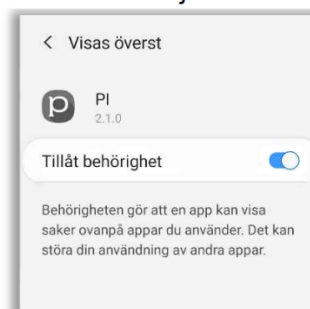



- **Registrering Phoniros PI:**

Efter installation behöver telefonen skapas i Phoniros system. Detta kallas för "registrering". Registreringen sker automatiskt vid första inloggningen i appen: Lifecare Mobil Omsorg. När inloggningen görs – se till att ha Phoniros PI påslaget i bakgrunden.

När registreringen har skett fylls följande fält i för appen, under "Om appen"

- Vy för telefon som **inte är registrerad**

The screenshot shows a mobile application interface with a blue header titled "Om appen" and a close button (X). Below the header, there are four input fields with the following labels: "Kommun", "Identifierare", "Registrerat telefonnamn", and "Registrerat telefonnummer". All fields are currently empty.

- Vy för telefon som **har registrerats**

The screenshot shows the same mobile application interface as the previous one, but with the following data populated in the fields: "Kommun" is "Solna API XOne", "Identifierare" is "3EF44315E02123A9", "Registrerat telefonnamn" is "SM-G390F", and "Registrerat telefonnummer" is empty.

När appen registrerats korrekt så skapas telefonen automatiskt i Phoniros webbgränssnitt.





- **Koppla mobil till organisation (Phoniro)**

För att kunna använda applikationerna Lifecare mobil omsorg och Phoniro PI krävs det att telefonen kopplas till rätt *organisation* och *aktiveras* i Phoniro.

För att göra detta behöver man först ta fram information om telefonen som gör det möjligt att hitta den i Phoniros system.

- Öppna Phoniro PI och välj flik "Om appen". Hitta rubriken "Identifierare" och använd den för att söka i nästa steg.

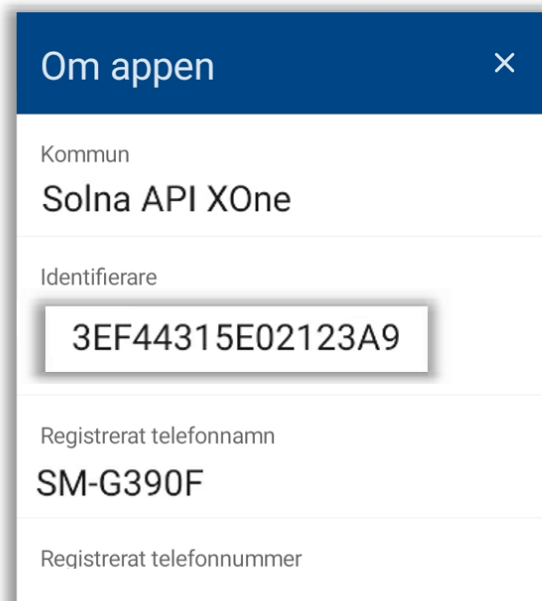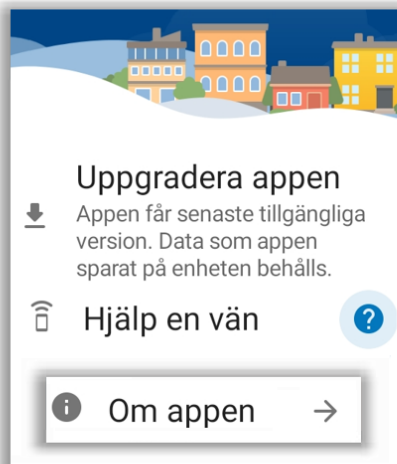



- Vid sökning i Phoniro: ange Identifierare och i fält "Läge" och "Status" ange enligt bild. När resultat visas - klicka på telefon

The screenshot shows the Phoniro search interface. At the top, there are navigation links for 'Startsida', 'Administration', and 'Mobiltelefoner'. Below this is a search filter section with the following fields:

- Namn: [Empty text box]
- Telefonnummer: [Empty text box]
- Blåtandsadress: [Empty text box]
- Identifierare: 3EF44315E02123A9
- Externt id: [Empty text box]
- Läge: Både kopplade och okopplade
- Status: Både aktiverade och inaktiverade
- Organisation: Alla

A search button labeled 'Sök' is located to the right of the filters. Below the filters, a search result is displayed for a phone named 'Test'. The details for this phone are:

- Identifierare: 3EF44315E02123A9
- Blåtandsadress: 000000
- Externt id: 000000
- Operativsystem: Android 9
- App: PI
- Version: 2.1.0.
- Organisation: Test

- Här visas information om telefonen. För att koppla till organisation öppna fält: **Tillhör organisation**
Aktivera telefonen genom att kryssa i rutan "Aktiv"
För att lättare hitta telefonen kan du även ändra "Namn"
Välj "Spara"

The screenshot shows the details page for a phone named 'Test'. The fields are:

- Registreringsdatum: [Empty text box]
- Identifierare: 3EF44315E02123A9
- Operativsystem: Android 9
- Blåtandsadress: 00000000
- App: PI
- Version: 2.1.0.
- Externt id: 00000000
- Namn: Test
- Tillhör organisation: Test
- Nummer: [Empty text box]
- IMEI-kod: [Empty text box]
- Anteckning: [Empty text box]

At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Aktiv' which is checked. At the bottom right, there are three buttons: 'Spara', 'Ta bort', and 'Avbryt'. A blue arrow points from the 'Spara' button to the text 'Välj "Spara"' in the list above.